

Cuprins

A. Vreau sa configurez cititorul	3
Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul Tracking-1 si aplicatia de pe tableta sau telefon	3
CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR	3
STABILIRE MOD DE COMUNICARE.....	4
STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA	4
INFORMATII DESPRE CITITORUL TRACKING-1	6
Conexiunea cu fir USB intre cititorul Tracking-1 si aplicatia de pe tableta sau telefon	7
Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul ALFLEX AFX-100 si aplicatia de pe tableta sau telefon	8
CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR	8
STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA	9
Conexiunea cu fir USB intre cititorul Alfex AFX-100 si aplicatia de pe tableta sau telefon	12
Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta sau telefon	13
CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR	13
STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA	14
Conexiunea cu fir USB intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta sau telefon	16
Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul GES3S si aplicatia de pe tableta sau telefon	17
CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR	17
STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA	17
Conexiunea cu fir USB intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta sau telefon	19
In aplicatie.....	20
B. Vreau sa fac un control.....	21
Lapte	21
INCEPE CONTROLUL	21
ADAUGA SAU SCANEAZA NUMAR MATRICOL.....	22
INTRODU MASURATORILE. SALVEAZA SAU STERGE MASURATORI	22
EDITEAZA ULTIMA MASURATOAREA ADAUGATA	24
FINALIZEAZA CONTROLUL.....	25

Bonitare	27
INCEPE CONTROLUL	27
ADUGA SAU SCANEAZA NUMAR MATRICOL	28
INTRODU MASURATORILE. SALVEAZA SAU STERGE MASURATORI	28
EDITEAZA ULTIMA MASURATOAREA ADAUGATA	30
FINALIZEAZA CONTROLUL	31
C. Vreau sa vad controalele efectuate	34
VEZI CONTROALE EFECTUATE	34
TRIMITE TOATE DATELE.....	35
RAPORTUL INDIVIDUAL AL FIECARUI CONTROL EFECTUAT	36
TRIMITE DATE CONTROL INDIVIDUAL EFECTUAT	37
D. Vreau sa trimit toate datele colectate	38
E. Controale planificate	39
F. Intrebari frecvente	42
NU POT FACE NICI UN CONTROL PENTRU CA NU AM LICENTA ACTIVA.	42
CUM ACTIVEZ BLUETOOTH-UL PE CITITOR SAU TABLETA	43
IMI APARE PE ECRAN MESAJUL "ESTI OFFLINE!"	43
NU MA POT LOGA IN CONT	44
IMI APARE MESAJUL DE "FUNCTIE INDISPONIBILA"	44
VREAU SA ACTUALIZEZ APLICATIA CU ULTIMA VERSIUNE	44
VREAU SA INSTALEZ/SA REINSTALEZ APLICATIA.....	45
CE FAC DACA A MERS CITITORUL DAR NU MAI MERGE.....	45
"TRIMITE TOATE DATELE" NU FUNCTIONEAZA	46
Contact.....	47

Versiune manual de utilizare: **04.2018**

Compatibil cu aplicatia [Registrul Genealogic XY](http://www.registrulgenealogic.ro) **versiunea**


A. Vreau sa configurez cititorul

Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul Tracking-1 si aplicatia de pe tableta sau telefon

CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR


Nota: In acest ghid, butoanele din dreapta si stanga butonului "ON" de pe cititor vor efectua diferite actiuni, depinzand de ce este afisat pe ecran direct deasupra lor.

- 1) Imediat dupa ce este deschis, este afisat ecranul principal al cititorului ca in figura urmatoare

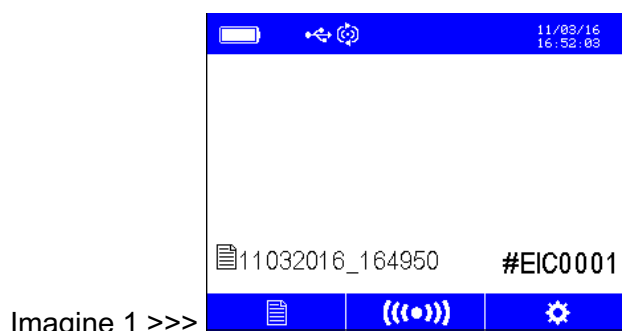

Pentru a afisa setarile apasati pe butonul 

- 2) Cand meniul cu setari este afisat (Imagine 2), foloseste sageata  spre stanga ca sa navighezi la optiunea referitoare la Bluetooth.  (al treilea sau al patrulea simbol pe unele cititoare de la stanga in randul de sus) si apasa pe butonul **ON**. Meniul Bluetooth se va deschide.

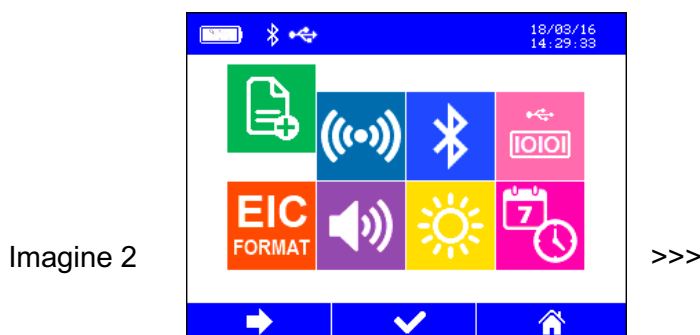

Imediat se observa optiunea Bluetooth **ON/OFF**. Daca este **OFF**, apasa pe "**ON**" pentru a o deschide.

- 3) Daca Bluetooth-ul este pe **ON**, mesajul “**Discoverable**” apare pe ecran (Imaginea 3). In momentul acesta, cititorul poate fi identificat de tableta sau telefon.



Imagine 3 >>>

STABILIRE MOD DE COMUNICARE


- Apasa sageata  spre dreapta pentru a te duce la optiunea a doua (Imagine 4).
- Apasati butonul “**ON**”
- Seteaza optiunea 



Imagine 4 >>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA

- 1) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita  (Imagine 5)

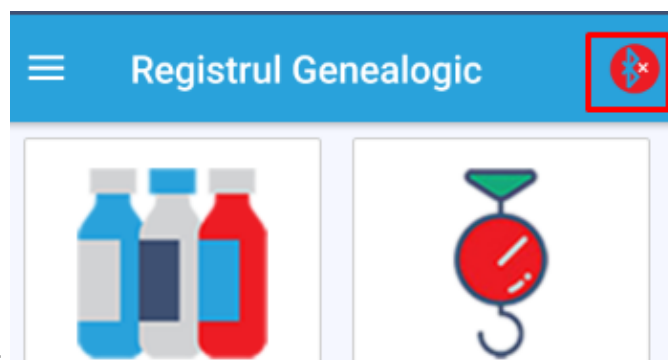


Imagine 5 >>>

- 2) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 6) pentru a cauta cititorul Tracking -1.




Imagine 6 >>>

- 3) Cand cititorul apare in lista (Imagine 7), apasa pe el si conexiunea se va realiza.

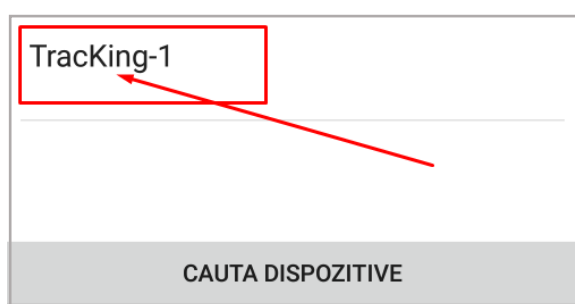

Imagine 7 >>>

- 4) Daca conexiunea este efectuata cu success mesajul de pe cititor in meniul Bluetooth se va schimba din "**Discoverable**" in "**Connected**" (Imagine 8) si simbolul de **Bluetooth** din partea de sus a ecranului se va schimba din alb in verde.

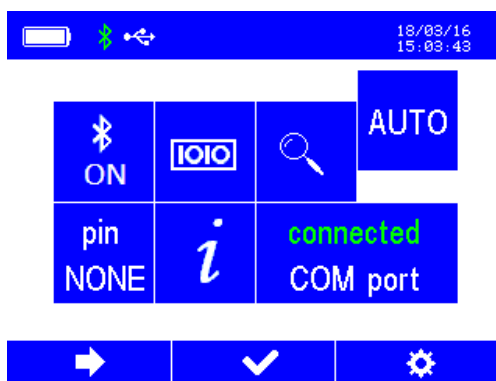

Imagine 8 >>>


INFORMATII DESPRE CITITORUL TRACKING-1

1) Informatiile despre setarile si starea Bluetooth ale cititorului TracKing-1 pot fi afisate (Imagine 9).

Pentru a le afisa, in meniul Bluetooth, foloseste  sageata dreapta pentru a ajunge la "Information"  si apasa pe butonul "ON".

2) Informatiile care sunt afisate aici sunt:

- Numele dispozitivului: Acesta este numele Bluetooth care este afisat pe telefon sau pe tableta in lista de cautare
- Adresa Bluetooth
- Codul de Securitate
- Profilul de conectare folosit. Ar trebui sa fie COM port (SPP). Vezi mai sus cum se face (la stabilire mod cominutare)
- Starea Bluetooth. Connected
- Host: adresa dispozitivului conectat la cititorul. Valoarea va fi "not available" daca nu este conectat nici un dispozitiv.

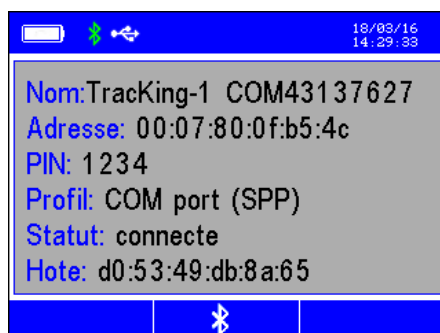

Imagine 9 >>>

Conexiunea cu fir USB intre cititorul Tracking-1 si aplicatia de pe tableta sau telefon


- 1) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tablet sau telefon
- 2) Seteaza  la fel ca in Imaginea 10



Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul ALFLEX AFX-100 si aplicatia de pe tableta sau telefon


CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR

- 1) Imediat dupa ce este deschis, este afisat ecranul principal al cititorului ca in imaginea urmatoare:

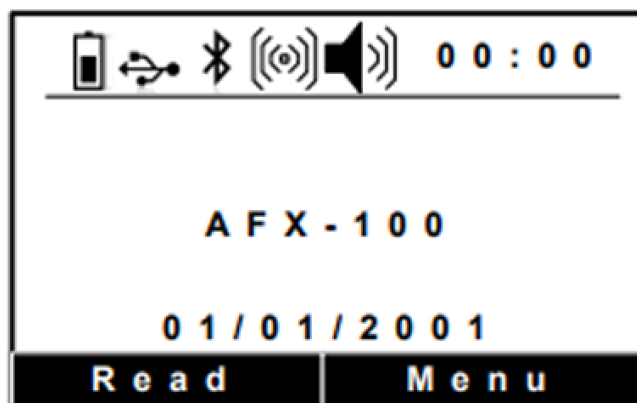


Imagine 11 >>>

- 2) Daca Bluetooth este activat deja pe cititor ecranul va fi ca in Imagine 12, cu simbolul  in partea de sus. In acest caz, sari peste aceasta sectiune si mergi direct la stabilirea conexiunii cu telefonul sau tableta.

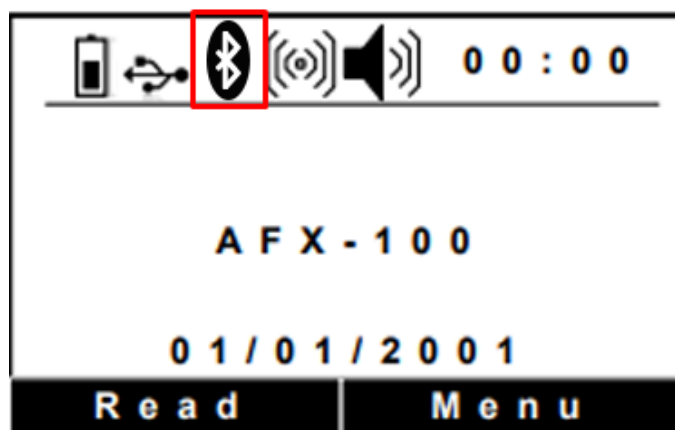


Imagine 12 >>>

- 3) Daca Bluetooth nu este activat deja pe cititor, intra in setari **apasand butonul dreapta de pe cititor (Menu)**

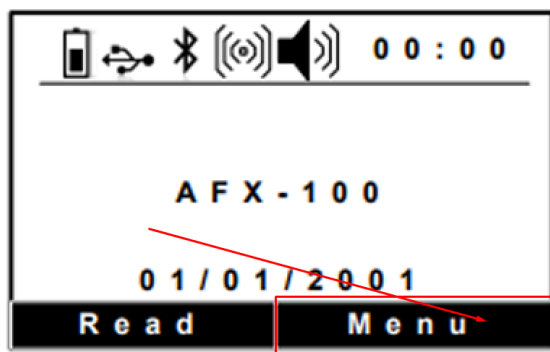


Imagine 13 >>>

- 4) In meniul cititorului apasa butonul dreapta si alege **Bluetooth** ca in Imagine 14 si apasa apoi pe **OK** (pe butonul din stanga)

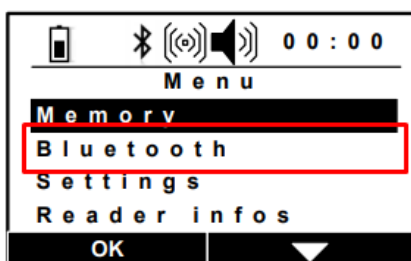


Imagine 14 >>>

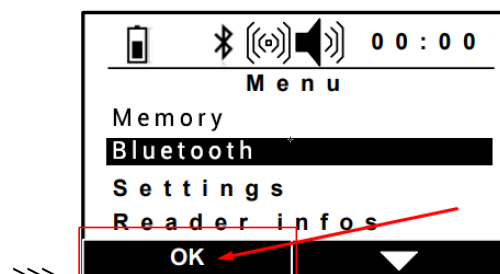

>>>


- 5) Dupa ce ai intrat in setarea Bluetooth, apasa pe **OK** (pe butonul din stanga) selectand **On/Off** pentru a activa Bluetooth.

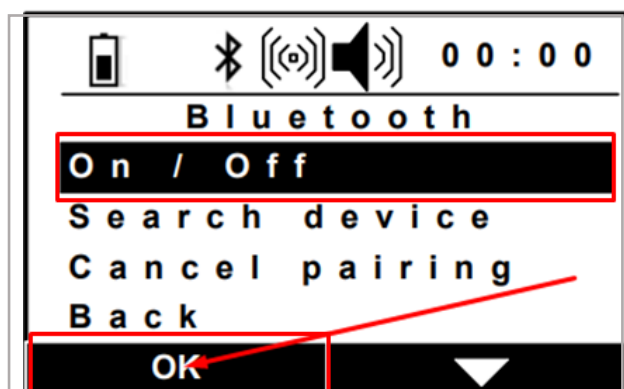

Imagine 15 >>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA

- 1) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita  (Imagine 16)

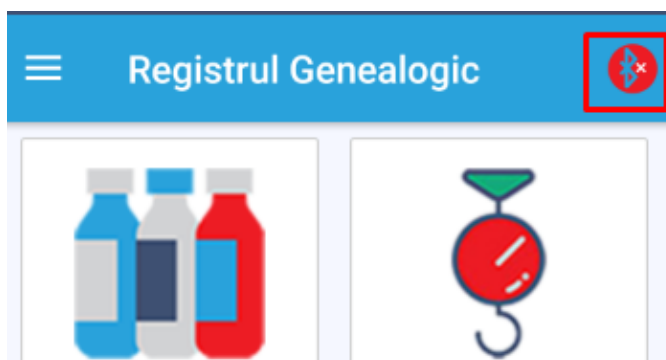


Imagine 16 >>>

- 2) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 17) pentru a cauta cititorul Alfex AFX-100




Imagine 17 >>>

- 3) Cand cititorul apare in lista (Imagine 18), apasa pe el si conexiunea se va realiza. Atunci cand cere PIN, introdu codul **0000**

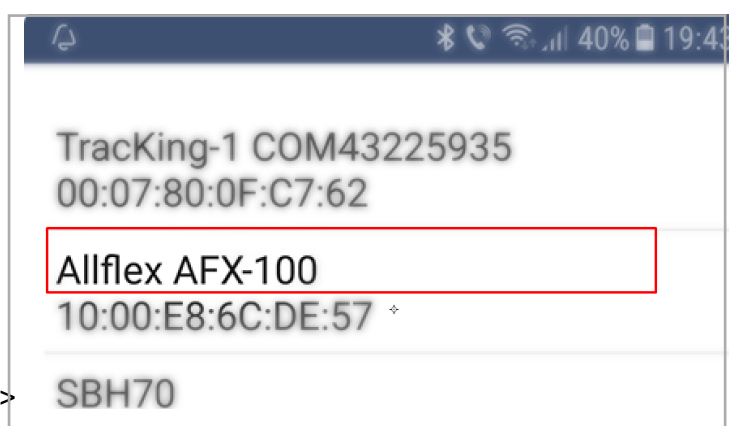


Imagine 18 >>>

- 4) Daca dispozitivul tau nu apare in lista din aplicatie, atunci apasa **Cauta Dispozitive** si asteapta sa fie gasit. Odata gasit, selecteaza dispozitivul conform punctului anterior (3)

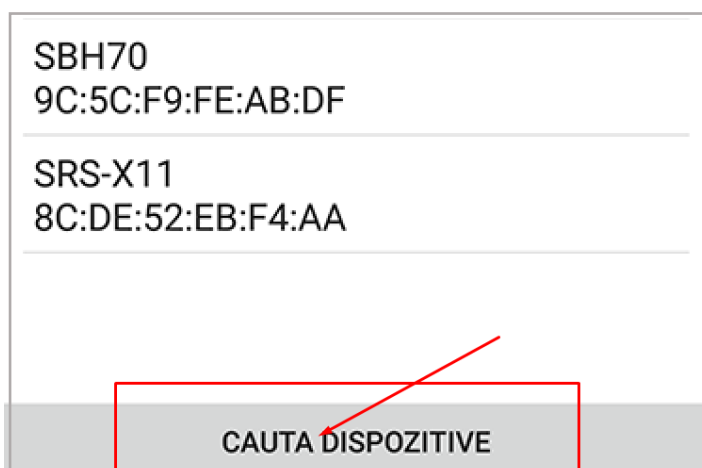

Imagine 19 >>>


- 5) Verifica pe cititor daca conexiunea s-a finalizat. Pe ecranul principal al cititorului, cand s-a realizat conexiunea intre cititor si tablet/telefon, simbolul  devine .

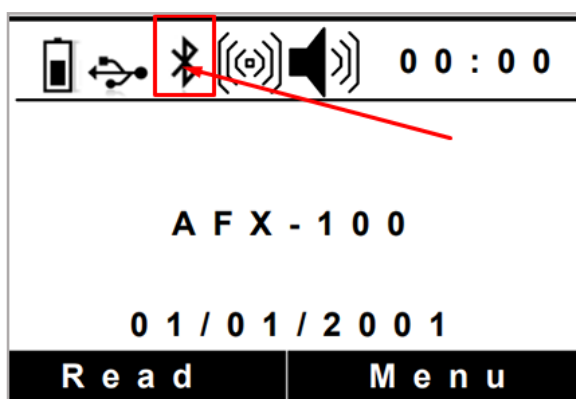

Imagine 20 >>>

Conexiunea cu fir USB intre cititorul Alfex AFX-100 si aplicatia de pe tableta sau telefon

- 1) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tableta sau telefon
- 2) Pe ecranul telefonului/tabletei vei vedea un mesaj ca in Imaginea de mai jos. Recomandam sa selectezi ca in imagine si apoi sa apesi **OK**.

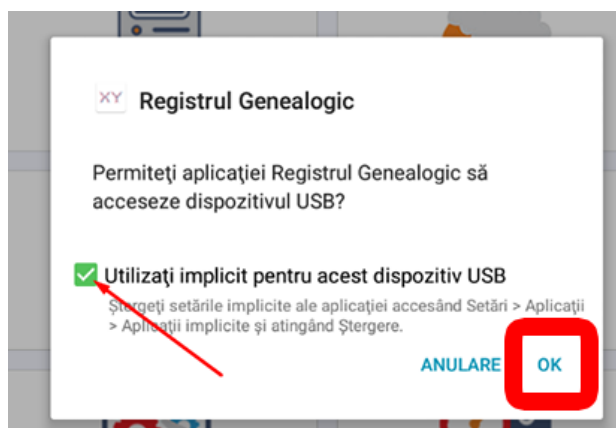


Imagine 21 >>>

Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta sau telefon


CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR

- 1) Tine apasat timp de 1 secunda pe  din dreapta de pe meniul cititorului. Dupa aceasta, led-ul  trebuie sa inceapa sa clipeasca.

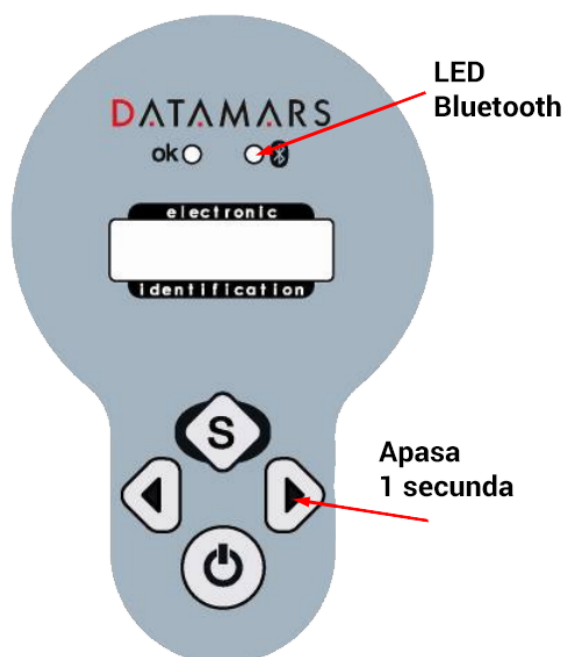


Imagine 22 >>>

- 2) Pe ecranul cititorului vor aparea setarile. Navigheaza folosind sagetile   pana cand ajungi la **BT Send EIC**. Selecteaza-l apasand  .

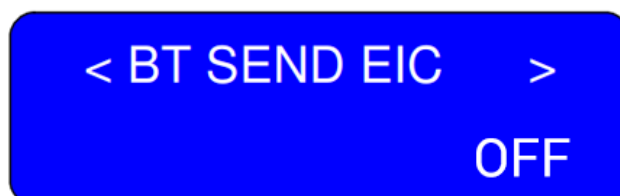

Imagine 23 >>>


- 3) Apasa apoi din nou pe  din dreapta si alege sa fie **ON** pe ecran. Apasa din nou pe  pentru a confirma.

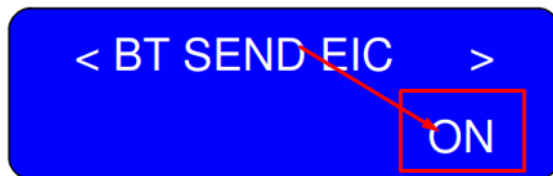

Imagine 24 >>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA

- 1) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita 

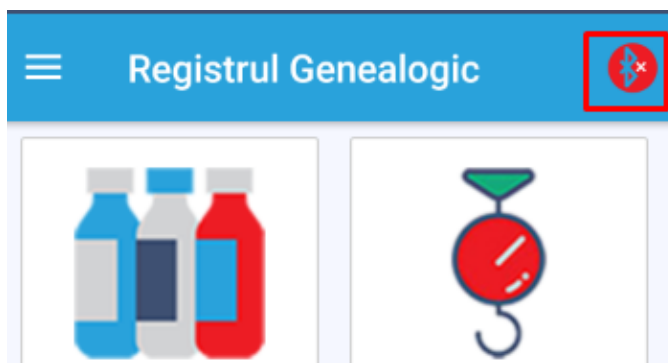

Imagine 25 >>>

- 2) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 26) pentru a cauta cititorul Bluestick




Imagine 26 >>>

- 3) Cand cititorul apare in lista (Imagine 27), apasa pe el si conexiunea se va realiza.

TrackKing-1 COM51168324 00:07:80:DD:82:31
Bluestick_S848 00:12:F3:30:C6:E7
Ges3S_S904 00:12:F3:2A:46:35


Imagine 27 >>>

- 4) Daca dispozitivul tau nu apare in lista din aplicatie, atunci apasa **Cauta Dispozitive** si asteapta sa fie gasit. Odata gasit, selecteaza dispozitivul conform punctului anterior (3)

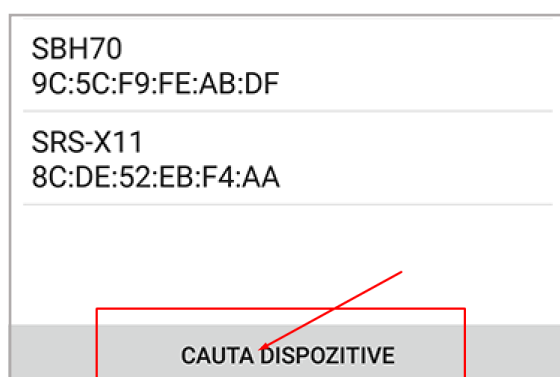

Imagine 28 >>>


- 5) Verifica pe cititor daca conexiunea s-a finalizat. Cand conexiunea intre cititor si telefon/tableta s-a realizat, atunci led-ul  ramane constant aprins.

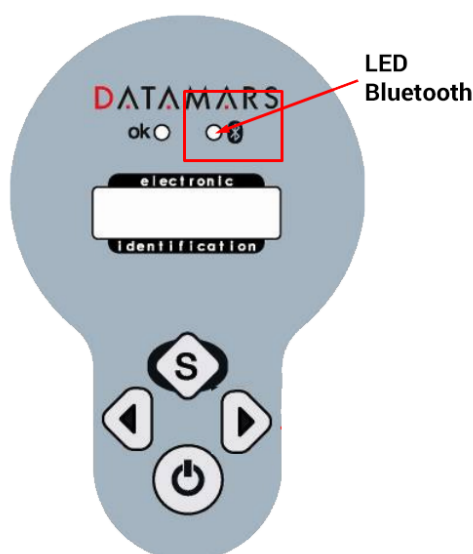

Imagine 29 >>>

Conexiunea cu fir USB intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta sau telefon

- 1) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tableta sau telefon
- 2) Pe ecranul telefonului/tabletei vei vedea un mesaj ca in Imaginea de mai jos.
Recomandam sa selectezi ca in imagine si apoi sa apesi **OK**.

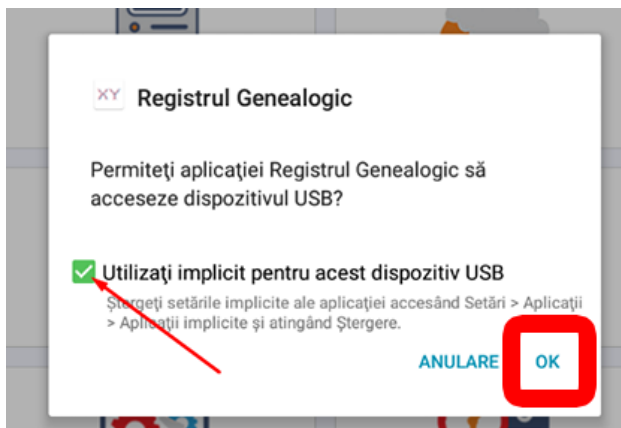


Imagine 30 >>>

Conexiunea fara fir (Bluetooth) intre cititorul GES3S si aplicatia de pe tableta sau telefon

CONFIGURAREA BLUETOOTH-ULUI PE CITITOR

- 1) Pe cititor, daca nu iti apare sus simbolul de  (fie alb sau verde), apasa butonul bluetooth timp de 2 secunde si apoi bselecteaza **ENABLE**

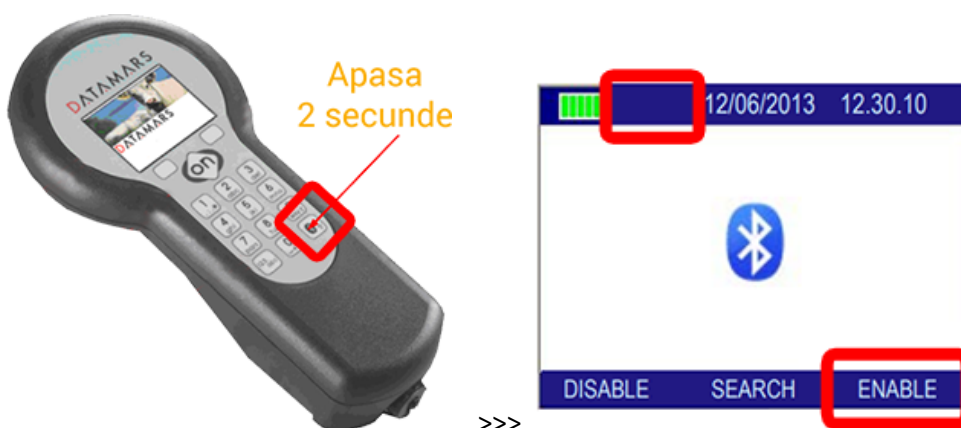


Imagine 31 >>>

>>>

STABILESTE CONEXIUNEA DE PE TELEFON SAU TABLETA

- 2) Pentru a conecta telefonul la tableta, intra in aplicatie pe telefon sau tableta, activeaza Bluetooth-ul daca deja nu e activat apasat pe iconita 

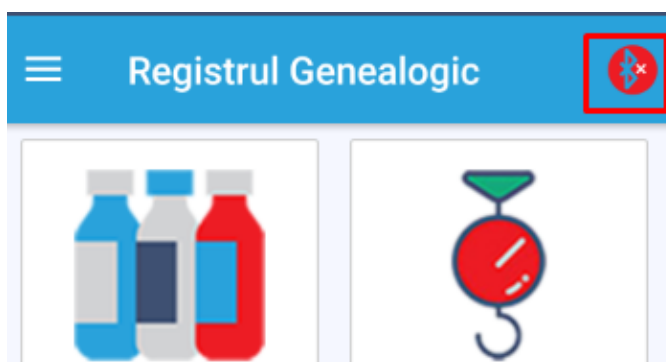


Imagine 32 >>>

- 3) Apoi apasa iar pe iconita Bluetooth din aplicatie (Imagine 33) pentru a cauta cititorul GES3S




Imagine 33 >>>

- 4) Cand cititorul apare in lista (Imagine 34), apasa pe el, introdu codul PIN si conexiunea se va realiza. **Codul PIN pentru conectare este 0**

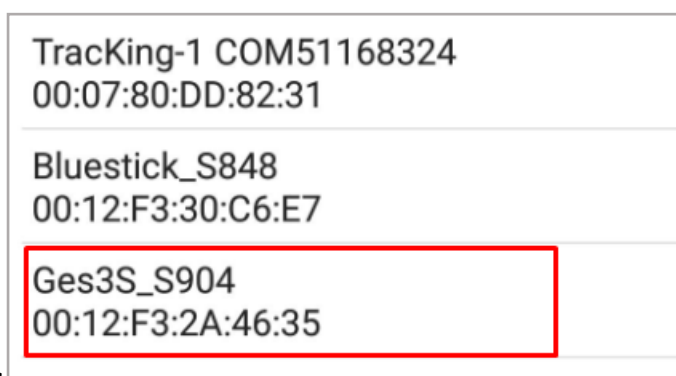


Imagine 34 >>>

- 5) Daca dispozitivul tau nu apare in lista din aplicatie, atunci apasa **Cauta Dispozitive** si asteapta sa fie gasit. Odata gasit, selecteaza dispozitivul conform punctului anterior (3)

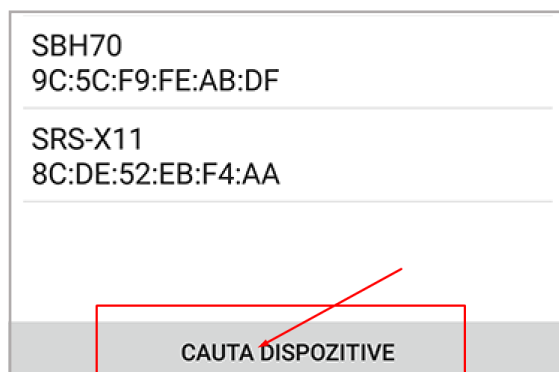

Imagine 35 >>>


- 6) Verifica pe cititor daca conexiunea s-a finalizat. Cand conexiunea intre cititor si telefon/tableta s-a realizat, simbolul  ar trebui sa fie **verde** (Imagine 36)

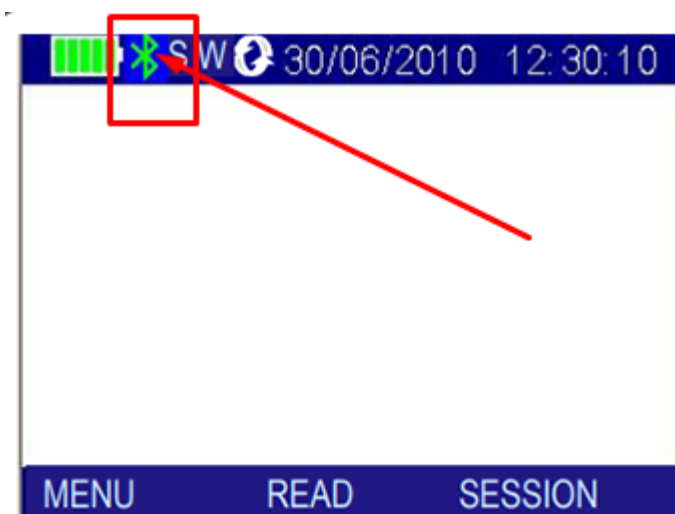

Imagine 36 >>>

Conexiunea cu fir USB intre cititorul Bluestick si aplicatia de pe tableta sau telefon


- 7) Conecteaza cititorul cu cablu USB la tableta sau telefon
8) Pe ecranul telefonului/tabletei vei vedea un mesaj ca in Imaginea de mai jos. Recomandam sa selectezi ca in imagine si apoi sa apesi **OK**.

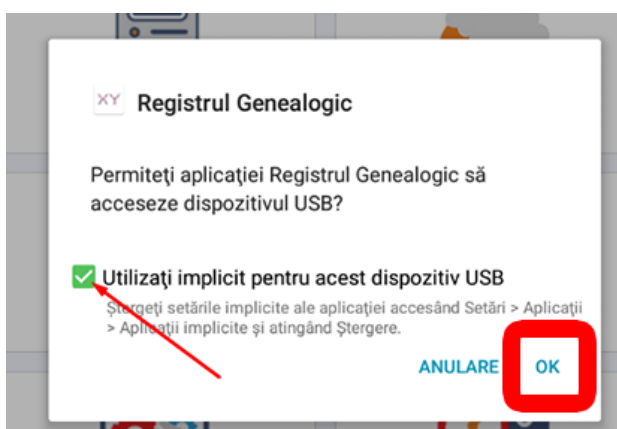

Imagine 37 >>>

In aplicatie

Pasii pentru configurarea cititorului ii gasesti si pe aplicatie, in meniu, sectiunea **Configureaza cititorul**.

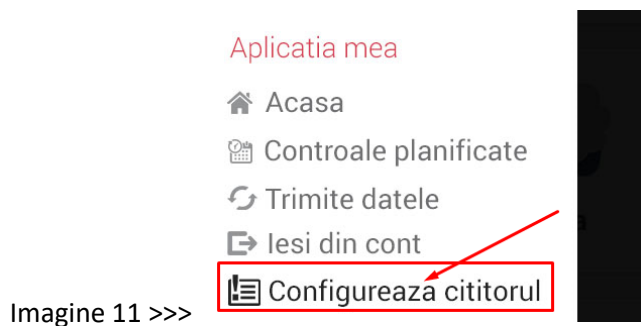


B. Vreau sa fac un control


Lapte

INCEPE CONTROLUL

- 1) Masuratoarea pentru lapte se poate face accesand in **meniul** functia **lapte** sau prin **ecranul de inceput** al aplicatiei pe **simbolul lapte**:

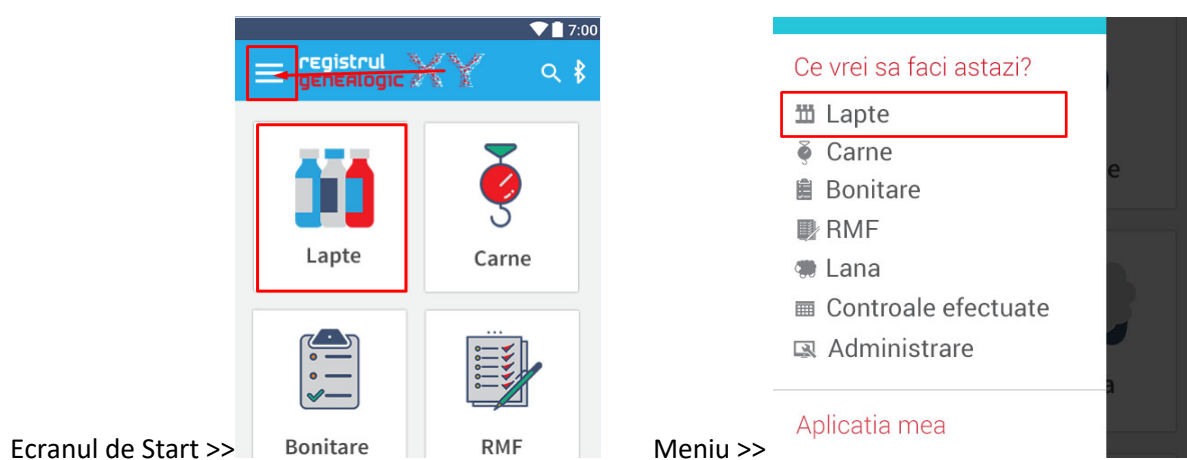

- 2) Va aparea **ecranul de pornire al functiei lapte** de unde poti incepe inregistrarea masuratorilor.

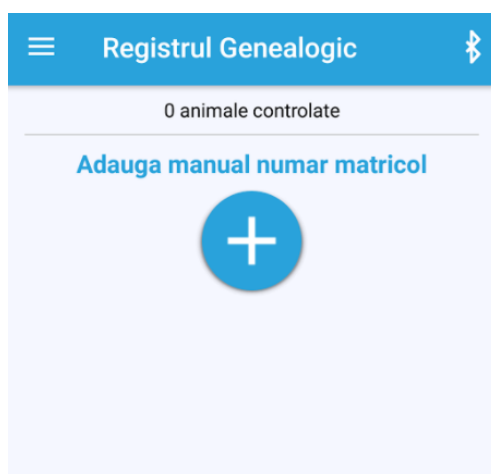

ADAUGA SAU SCANEAZA NUMAR MATRICOL

- 3) Poti inregistra un numar matricol al unui animal prin **scanarea** acestuia cu cititorul conectat la aplicatie
- 4) Daca nu doresti sa folosesti cititor-ul atunci poti **adauga manual** numarul matricol apasand pe butonul de **Adaugare masuratoare**



INTRODU MASURATORILE. SALVEAZA SAU STERGE MASURATORI

- 5) Dupa ce este introdus manual sau scanat un numar matricol va aparea pe ecran o fereastra unde sunt urmatoarele informatii:
 - **Campul cu numarul matricol.** Daca s-a folosit scannerul, acesta este deja completat. Daca s-a optat pentru introducerea manuala atunci campul este liber si trebuie completat folosind tastatura telefonului. RO apare intotdeauna automat in aplicatie.
 - **Campul unde poate fi trecuta masuratoarea**

- Butonul **Vezi istoric** arata toate lista de numere matricole adaugate care nu au inregistrata masuratoarea inca inclusiv masuratoarea scanarea tocmai facuta.
- Dupa ce este adaugata valoarea masurata de lapte, butonul **Vezi istoric** devine **Salveaza**.

- Daca se alege **salvarea masuratorii** aceasta este inregistrata si introdusa in datele finale ale controlului. **Nu va mai aparea la accesarea butonului Vezi istoric.** Daca nu se apasa **Salveaza** si se continua introducerea/scanarea numerelor matricole, atunci aceasta **masuratoare nesalvata** va fi gasita in **Istoricul scanarilor**, **in ordinea in care au fost scanate/introduse.**

The screenshot shows the 'Registrul Genealogic' app interface. At the top, there's a blue header with a menu icon, the title 'Registrul Genealogic', and a Bluetooth icon. Below the header, there are two circular buttons: a blue one with a left arrow labeled 'vezi ultima masuratoare' and a green one with a checkmark labeled 'am terminat controlul'. Below these, it says '1 animale controlate'. A section titled 'Adauga manual numar matricol' features a large blue circle with a white plus sign. Underneath, there's a text input field containing 'R02354569984'. Below the input field, it says 'Masuratoare:' followed by another text input field containing '20'. At the bottom, there are two buttons: a red one labeled 'Sterge' and a blue one labeled 'Salveaza'.

- Butonul **Sterge** sterge **definitiv** numarul matricol adaugat, chiar daca are sau nu introdusa masuratoare.


EDITEAZA ULTIMA MASURATOAREA ADAUGATA

- 6) Butonul de **Vezi ultima masuratoare** iti permite sa vezi ultima masuratoare de lapte care a fost introdusa.
- 7) Va reaparea acelasi ecran de introducere a masuratorilor pe care le poti edita daca ai introdus ceva gresit.

Vezi urmatoarea masuratoare apasand pe  . Acestea iti permit navigarea inainte si inapoi printre masuratori introduse. Simbolul  te duce la prima scanare din set introdusa.

FINALIZEAZA CONTROLUL

- 8) Dupa ce ai finalizat de introdus toate masuratorile dorite poti apasa pe **Am terminat controlul** pentru a vedea raportul final

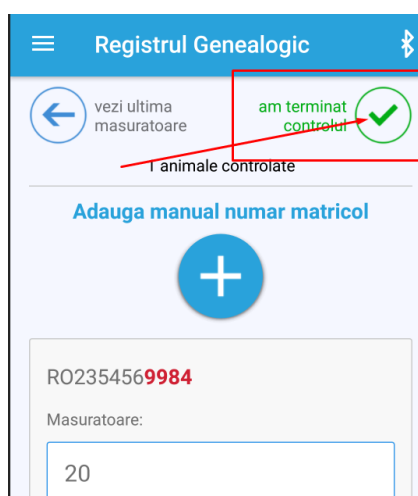

- 9) Dupa **terminarea controlului** vei vedea raportul final cu toate informatiile despre tipul de control, data, numarul animalelor scanate si a celor planificate, crescator si umarul de animale scanate dar care nu au masuratori introduse.

Tip control	Lapte_28.01.2018
Data incepere control	Data: 28-01-2018 Ora: 15:52:56 De catre: Mircea Alex
Numar animale controlate	4
Numar animale planificate	-
Crescator planificat	-
Animale fara masuratori	2
Trimis	Netrimis
 Trimite datele	

- 10) In partea de sus a raportului apare denumirea automata data controlului de catre aplicatie. Denumirea este formata din Lapte (tip control)_Data_ Nume crescator. **Numele crescatorului poate fi introdus manual in camp de mai jos.**


Detalii Control	
Lapte_28.01.2018_	
Introdu nume crescator	
<div> <div>Continua Controlul</div> <div>Finalizeaza Control</div> </div>	
Tip control	Lapte_28.01.2018
Data incepere control	Data: 28-01-2018 Ora: 14:54:20 De catre: Mircea Alex
Numar animale controlate	1

- 11) Aici in zona de vizualizare date control poti alege sa **finalizezi controlul** sau sa il **continui**.
- 12) Apasarea butonului de **finalizeaza control** nu este obligatorie. Controlul este salvat in rapoarte automat ca masura de siguranta.
- 13) Daca doresti sa incepi un control nou in aceeași zi atunci este necesar sa apesi **Finalizeaza control**
- 14) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face
- *Incpand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul*
 - *In aceeași zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe **Finalizeaza control***
- 15) Dupa ce s-a apasat pe **Finalizeaza control**, orice alte masuratori introduse in aceeași zi vor fi salvate ca si control nou individual

Bonitare

INCEPE CONTROLUL

- 1) Bonitarea se poate face accesand in **meniu** functia **bonitare** sau prin **ecranul de inceput** al aplicatiei pe **simbolul bonitare**:

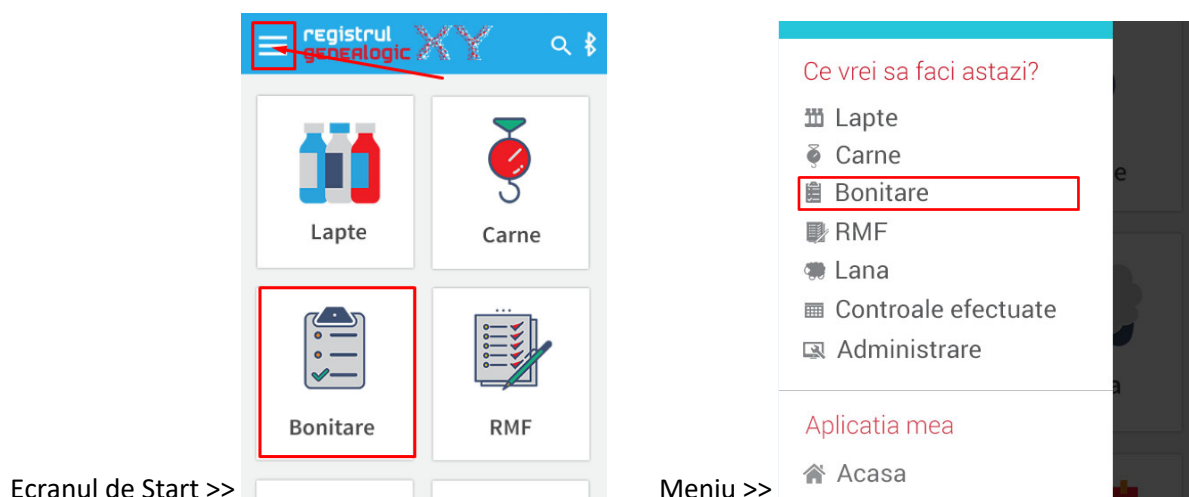

- 2) Va aparea **ecranul de pornire al functiei bonitare** de unde poti incepe inregistrarea masuratorilor.



ADAUGA SAU SCANEAZA NUMAR MATRICOL

- 3) Poti inregistra un numar matricol al unui animal prin **scanarea** acestuia cu cititorul conectat la aplicatie
- 4) Daca nu doresti sa folosesti cititorul atunci poti **adauga manual** numarul matricol apasand pe butonul de **Adaugare masuratoare**



INTRODU MASURATORILE. SALVEAZA SAU STERGE MASURATORI

- 5) Dupa ce este introdus manual sau scanat un numar matricol va aparea pe ecran o fereastra unde sunt urmatoarele informatii:
 - **Campul cu numarul matricol.** Daca s-a folosit scannerul, acesta este deja completat. Daca s-a optat pentru introducerea manuala atunci campul este gol si trebuie completat folosind tastatura telefonului. RO apare intotdeauna automat in aplicatie.
 - **Cele 3 campuri cu Conformatie constitutie, Extindere lana si Greutate corporala** unde pot fi trecute masuratorile

Animalul nu este programat pentru control

Adauga Masuratoare

Tara: RO

Numar Matricol: 5369844789

Conformatie Constitutie: |

Extindere lana:

Greutate corporala:

Sterge Vezi istoric

1 2 3 -

4 5 6 ↵

7 8 9 ✕

, 0 . ✓

- Butonul **Vezi istoric** arata toate lista de numere matricole adaugate care nu au inregistrate 1, 2 sau toate cele 3 masuratori pentru bonitare inclusive numarul matricol curent introdus.
- Dupa ce sunt adaugate toate cele 3 valori in cele 3 campuri de masuratori, butonul **Vezi istoric** devine **Salveaza**.

Animalul nu este programat pentru control

Adauga Masuratoare

Tara: RO

Numar Matricol: 2398847708

Conformatie Constitutie: 9

Extindere lana: 1

Greutate corporala: 40

Sterge Salveaza


1 2 3 -

4 5 6 ↵

7 8 9 ✕

, 0 . ✓

- Daca se alege **salvarea masuratorii** aceasta este inregistrata si introdusa in datele finale ale controlului. **Nu va mai aparea la accesarea butonului Vezi istoric.**
- Daca nu se apasa **Salveaza** si se continua introducerea/scanarea numerelor matricole, atunci **masuratorile nesalvate** vor fi gasite in **Istoricul scanarilor**. Aici vor aparea numerele matricole introduse carora le lipseste 1 masuratoare din cele 3, 2 masuratori din cele 3 sau chiar toate cele 3 masuratori, **in ordinea in care au fost scanate/introduse**

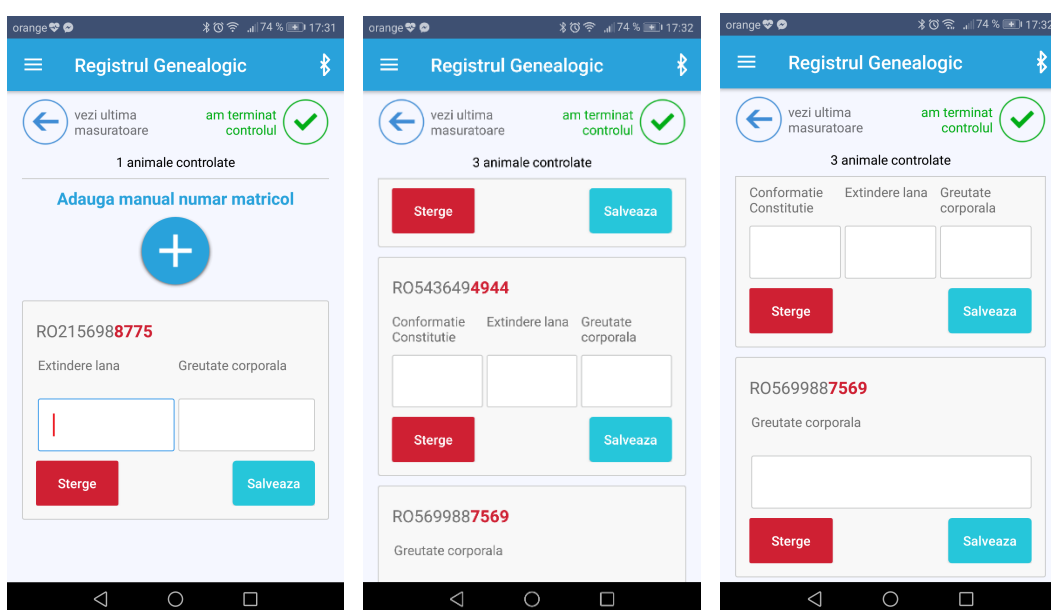


- Butonul **Sterge** sterge **definitiv** numarul matricol adaugat, chiar daca are sau nu introduse masuratori.

EDITEAZA ULTIMA MASURATOAREA ADAUGATA


- 6) Butonul de **Vezi ultima masuratoare** iti permite sa vezi ultimul masuratoare care a fost introdusa.
- 7) Va reaparea acelasi ecran de introducere a masuratorilor. Pe acestea le poti edita navigand in cazul in care nu le-ai introdus corect
- 8) Vezi urmatoarea masuratoare apasand pe  . Acestea iti permit navigarea inainte si inapoi printre masuratorile introduse. Simbolul  te duce la prima

scanare din set introdusa. Daca stergi una din cele 3 masuratori ale unui numar matricol, numarul matricol respectiv va reveni in **Istoric scanari** pana va fi **completat** si **salvat**.

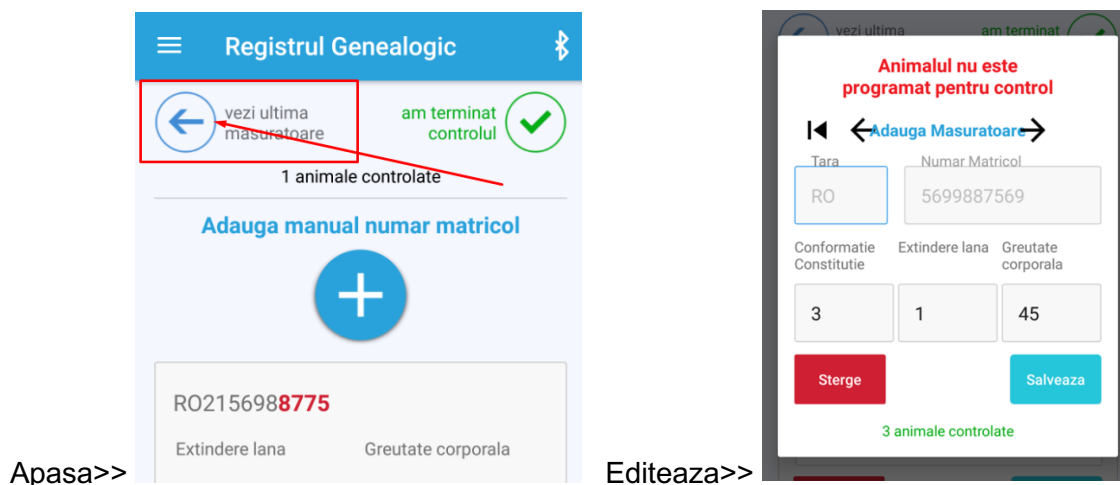

FINALIZEAZA CONTROLUL

- 9) Dupa ce ai finalizat de introdus toate masuratorile dorite poti apasa pe **Am terminat controlul** pentru a vedea raportul final

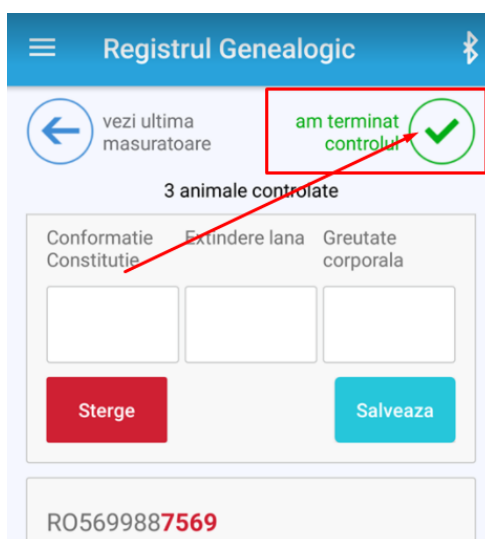

- 10) La terminarea controlului toate numerele matricole scanate, **chiar daca nu au au masuratori introduse** in zona de **Istoric scanari**, vor fi salvate automat in raportul final, ca masura de siguranta.

- 11) Asigura-te ca ai introdus toate masuratorile de bonitare corect. **Pentru a fi mai usor de gestionat pentru tine, iti recomandam sa apesi [Salveaza](#) de fiecare data cand ai completat toate cele 3 masuratori.** Astfel istoricul scanari va cuprinde doar acele numere matricole care nu au inca masuratori introduse. Butonul [Salveaza](#) nu functioneaza daca nu sunt toate cele 3 masuratori introduse.

- 12) Dupa **terminarea controlului** vei vedea raportul final cu toate informatiile despre tipul de control, data, numarul animalelor scanate si a celor planificate, crescator si umarul de animale scanate dar care nu au masuratori introduse.

Tip control	Bonitare_28.01.2018
Data incepere control	Data: 28-01-2018 Ora: 17:31:20 De catre: Mircea Alex
Numar animale controlate	3
Numar animale planificate	-
Crescator planificat	-
Animale fara masuratori	2
Trimis	Netrimis
→ Trimite datele	

- 13) In partea de sus a raportului apare denumirea automata data controlului de catre aplicatie. Denumirea este formata din Bonitare (tip control)_Data_Nume crescator. **Numele crescatorului poate fi introdus manual in campul de mai jos.**

14) Aici in zona de vizualizare date control poti alege sa **finalizezi controlul** sau sa il **continui**.

15) Apasarea butonului de **finalizeaza control** nu este obligatorie. Controlul este salvat in rapoarte automat ca masura de siguranta.

16) Daca doresti sa incepi un control nou in aceeași zi atunci este necesar sa apesi **Finalizeaza control**

17) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face


- Incepand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul
- In aceeași zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe **Finalizeaza control**

18) Dupa ce s-a apasat pe **Finalizeaza control**, orice alte masuratori introduse in aceeași zi vor fi salvate ca si control nou individual

C. Vreau sa vad controalele efectuate

VEZI CONTROALE EFECTUATE


- 1) Controalele efectuate pot fi vizualizate accesand in **meniu** functia **Controale efectuate** sau prin **ecranul de inceput** al aplicatiei pe **simbolul Controale efectuate**:

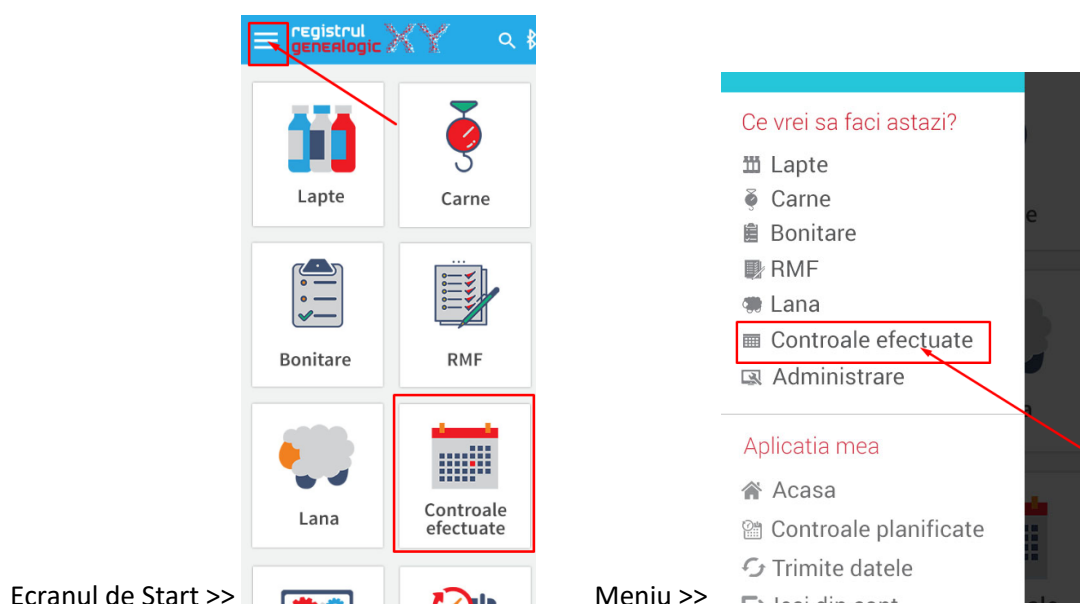

- 2) Controalele efectuate apar in ordine cronologica. Ordinea crescatoare sau descrescatoare poate fi aleasa apasand pe **Ordoneaza** ▾




- 3) Controalele ale caror date au fost deja trimise au simbolul  in dreptul lor iar cele ale caror date nu au fost trimise au simbolul 
- 4) Pentru a incepe un control nou poti apasa si pe **Incepe control nou** in lista de controale efectuate


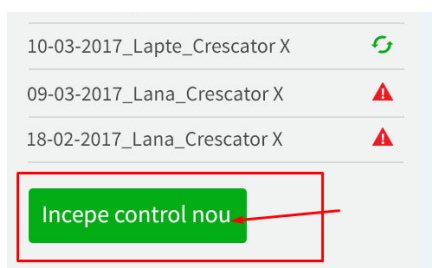


TRIMITE TOATE DATELE

- 5) Pentru a trimite datele tuturor controalelor efectuate apasa **Trimite toate datele**

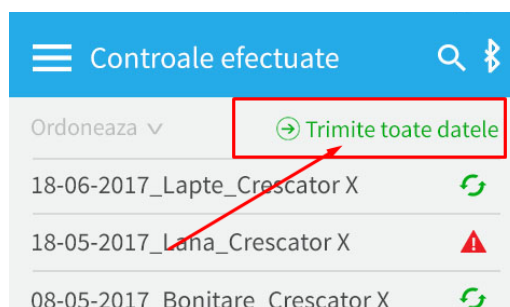

- 6) Daca vei da click pe simbolurile  sau  ale fiecarui control, vei primi informatii pe scurt despre acel control: cate animale au fost scanate si care este starea lui **trimis/netrimis**.

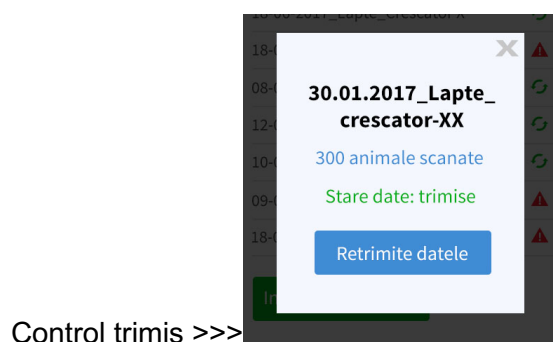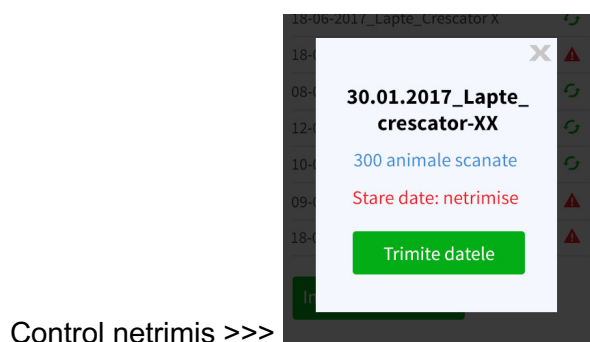

Aici poti [Trimite datele](#) pentru fiecare control individual sau [Retrimite datele](#) la fel, pentru fiecare control individual

7) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face

- Incepand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul
- In aceeași zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe [Finalizeaza control](#) in raportul individual al controlului

RAPORTUL INDIVIDUAL AL FIECARUI CONTROL EFECTUAT

8) La apasarea pe numele controlului

18-06-2017_Lapte_Crescator X



in lista de controale efectuate vei vedea raportul final cu toate datele introduse pentru fiecare control efectuat.

Trage ecranul in sus pentru a vedea toate informatiile despre tipul de control, data, numarul animalelor scanate si a celor planificate, crescator si umarul de animale scanate dar care nu au masuratori introduse, ca in imaginea de mai jos.

Tip control	Bonitare_28.01.2018
Data incepere control	Data: 28-01-2018 Ora: 17:31:20 De catre: Mircea Alex
Numar animale controlate	3
Numar animale planificate	-
Crescator planificat	-
Animale fara masuratori	2
Trimis	Netrimis
➔ Trimitte datele	

9) In partea de sus a raportului apare denumirea automata data controlului de catre aplicatie. Denumirea este formata din Tip Control_Data_Nume crescator.

10) Daca animalele scanate nu au fost gasite in nici o lista a crescatorilor atunci **numele crescatorului poate fi introdus manual in campul de mai jos.**

Tip control		Bonitare_28.01.2018
Data incepere control		Data: 28-01-2018 Ora: 17:31:20 De catre: Mircea Alex

11) Aici in zona de vizualizare date control poti alege sa **finalizezi controlul** sau sa il **continui**.

12) Apasarea butonului de **finalizeaza control** nu este obligatorie. Controlul este salvat in rapoarte automat ca masura de siguranta. Daca in aceeaasi zi se continua introducerea de masuratori fara sa se fi apasat **continua control** atunci **acele date vor fi adaugate automat la controlul curent ca masura de siguranta**.

13) Daca doresti sa incepi un control nou in aceeaasi zi atunci este necesar sa apesi **Finalizeaza control**

14) Dupa ce s-a apasat pe **Finalizeaza control**, orice alte masuratori introduse in aceeaasi zi vor fi salvate ca si control nou individual


TRIMITE DATE CONTROL INDIVIDUAL EFECTUAT

15) Poti **Trimite datele** individual pentru fiecare control direct din raportul controlului:

- *Daca controlul a fost efectuat cu cel putin 1 zi inainte*
- *In aceeaasi zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe **Finalizeaza control** in raportul individual al controlului*

D. Vreau sa trimit toate datele colectate

- 1) Poti trimite toate datele colectate la baza de date din meniu, apasand **Trimite datele**

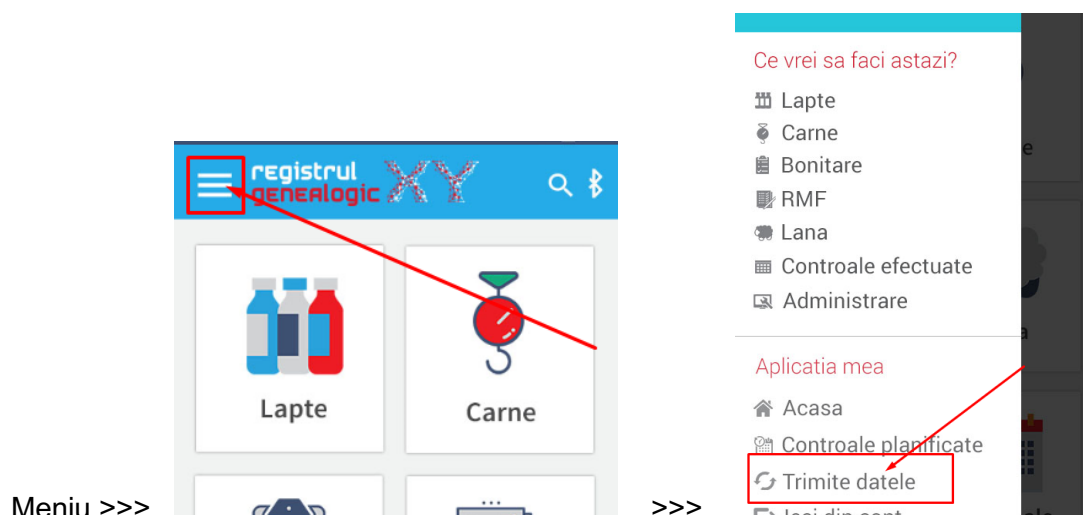


- 2) Trimiterea informatiilor colectate catre server se poate face:


- Incepand cu a doua zi dupa ce a fost facut controlul
- In aceeași zi in care s-a facut controlul dupa ce s-a apasat pe **Finalizeaza control** in raportul individual al controlului.

E. Controale planificate


- 1) Pentru a vizualiza listele cu controalele planificate, se alege din meniu apasand **Controale planificate**.

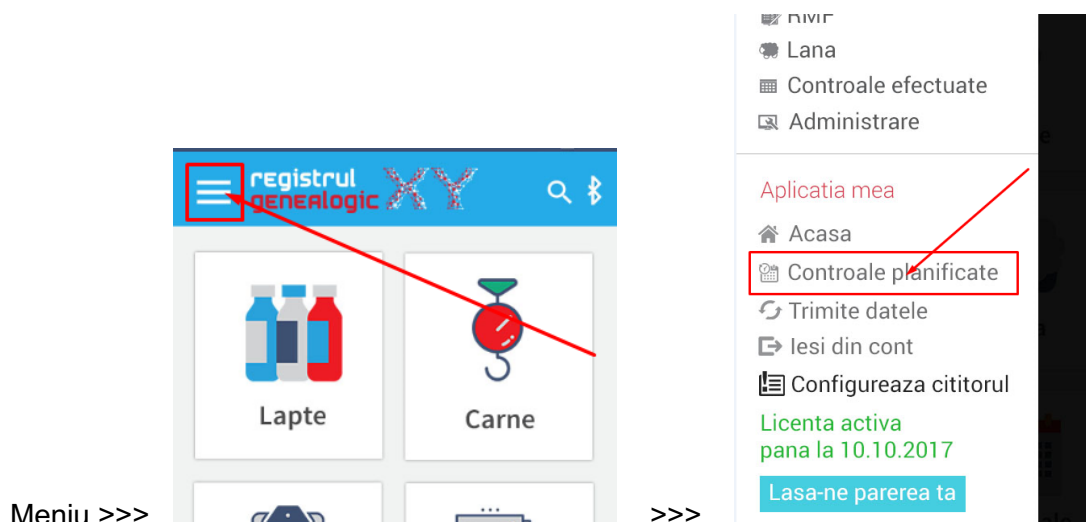


- 2) Atunci cand nu sunt controale planificate, acest lucru va fi semnalat pe pagina. Daca aplicatia este conectata la internet se apasa Incarca listele si aplicatia va incarca toate listele de controale planificate.

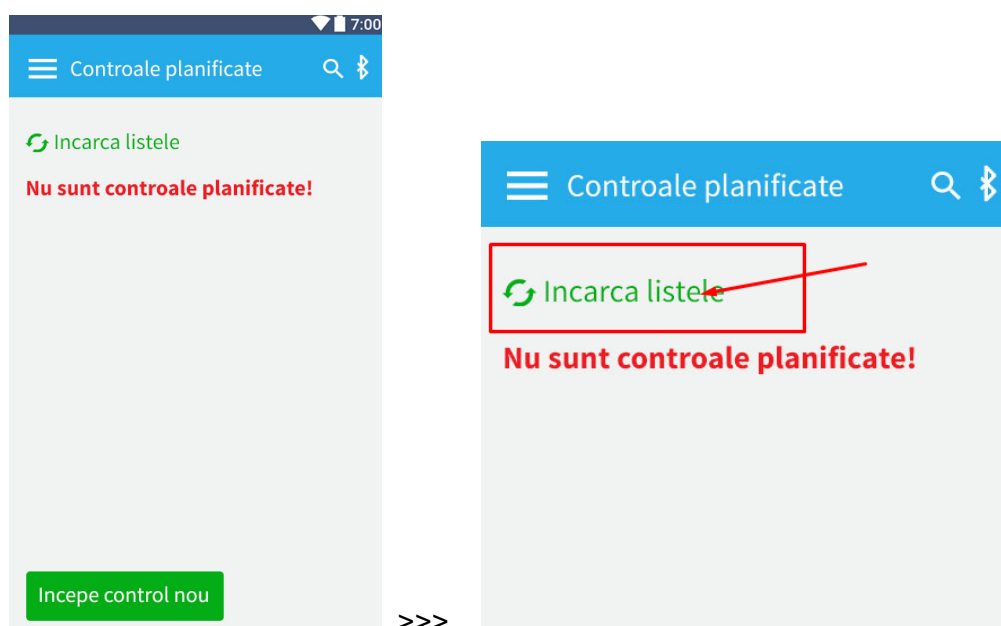


- 3) Listele incarcate sunt impartite in tipuri de controale: Lapte, Carne, Lana si Altele. In categoria altele sunt incluse alte tipuri de controale care nu sunt din categoria primelor 3. La apasarea pe fiecare categorie pot fi vizualizate doar listele cu tipurile respective de controalele planificate. Listele vor aparea un ordine cronologica, dupa data. Controlul planificat in ziua respectiva este evidenciat suplimentar iar cele care sunt din zile anterioare sunt semnalizate mai slab. La apasarea pe sageti se pot vizualiza controalele mai vechi sau cele planificate in zilele urmatoare.

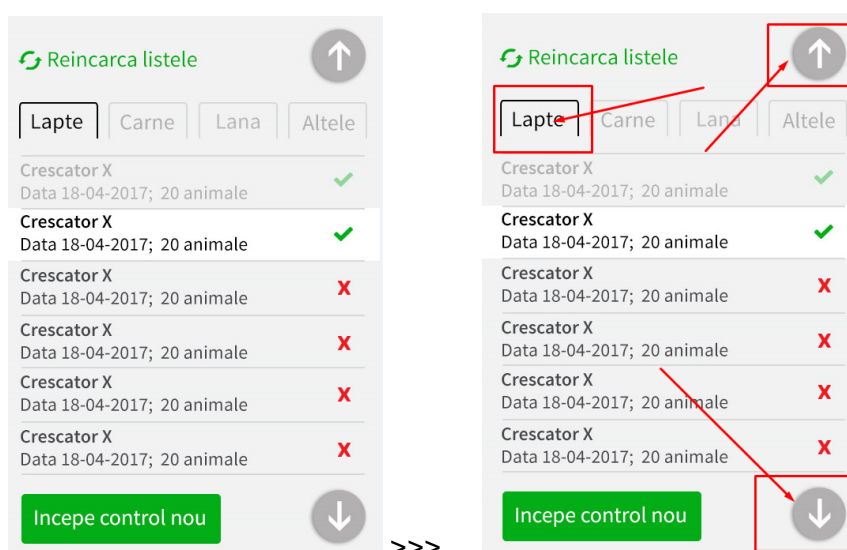


- 4) In dreptul fiecarui control planificat este trecut statusul acestuia: daca a fost realizat apare simbolul iar daca nu a fost inca efectuat apare . Prin apasarea statusului se deschide o fereastra in care sunt date detaliile controlului planificat, statusul acestuia si posibilitatea de a incepe controlul planificat atunci cand acesta are status nerealizat.

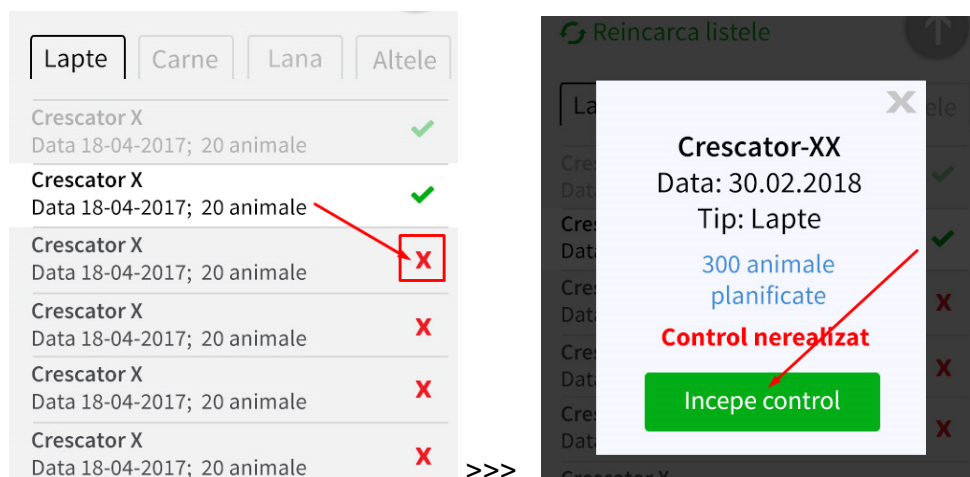

- 5) Functionalitatea de controale planificate face ca de fiecare data cand scanezi un numar matricol sistemul sa verifice in listele de controale planificate care au data cu 3 zile inainte si 3 zile dupa data la care se face scanarea, in mod AUTOMAT.
- 6) Atunci cand se doreste identificarea/masurarea unor numere matricole din alte liste fata de cele pe care le interogheaza sistemul in mod automat (3 zile dupa si inainte de data scanarii), se poate alege manual lista din care se va face interogarea numerelor matricole. Prin apasarea pe denumirea listei, se va deschide automat controlul afarent categoriei din care face parte controlul planificat (Lapte, Carne, Lana, Altele).

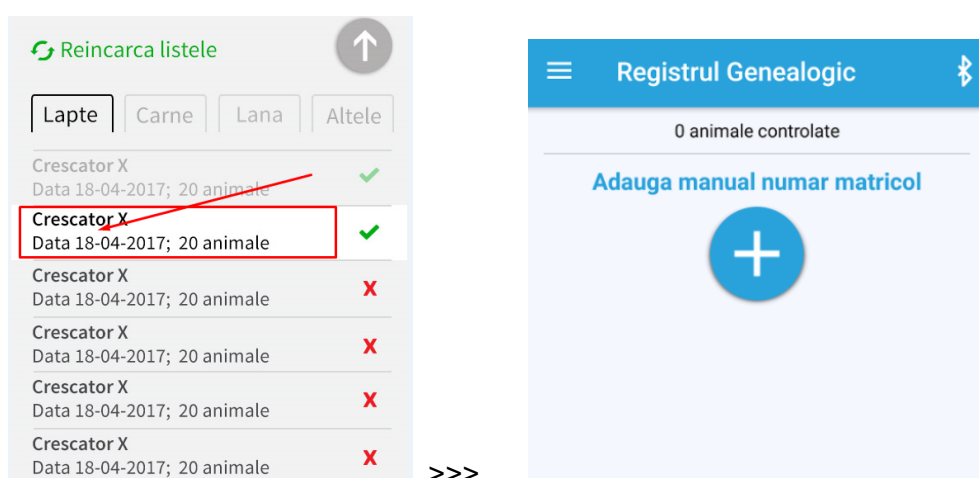


- 7) Un control nou se poate incepe la apasarea butonului de **Incepe control nou**. Aplicatia va merge la lista controalelor pe care le poti face. O data inceputa scanarea numerelor matricole, aplicatia va cauta in listele de controale planificate in intervalul de 3 zile inainte/dupa si va identifica automat din ce lista de controale face parte numarul matricol respectiv,

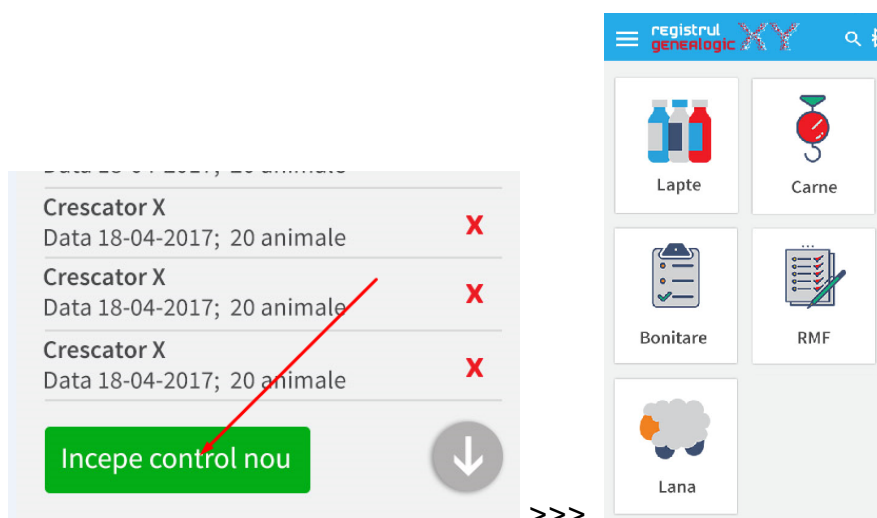

F. Intrebari frecvente

NU POT FACE NICI UN CONTROL PENTRU CA NU AM LICENTA ACTIVA.

Atunci cand licenta nu este activa, o parte din functionalitati nu sunt accesibile. Pe ecranul de start vor fi gri iar in meniu sunt semnalizate cu rosu.

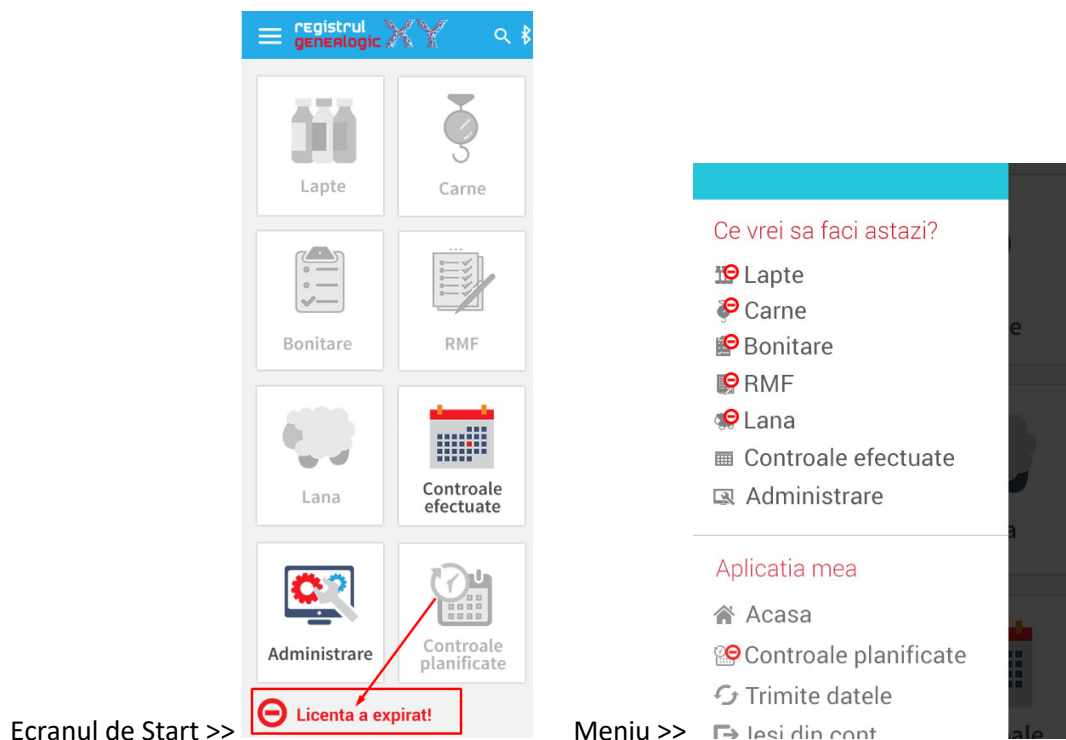


Iti recomandam sa parasesti aplicatia si apoi sa te reconectezi. Deasemnea trebuie sa stii ca licenta se reinnoieste atunci cand esti conectat la internet asa ca asigura-te ca ai internetul conectat atunci cand te reconectezi la aplicatie

Daca in continuare nu functioneaza si tu stii ca licenta ta ar trebui sa fie activa atunci te rugam sa contactezi compania **Idea Soft** pentru a lamuri situatia.

CUM ACTIVEZ BLUETOOTH-UL PE CITITOR SAU TABLETA


Bluetooth-ul poate fi activat din softul telefonului sau direct din aplicatie apasand pe 

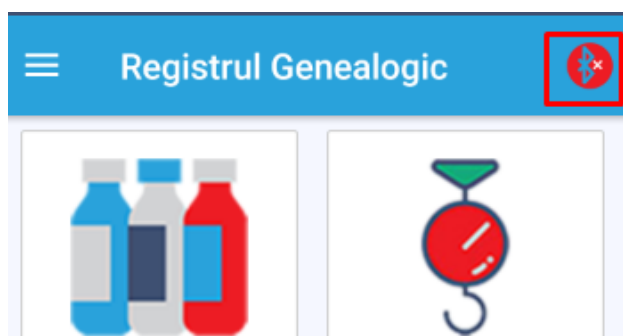

IMI APARE PE ECRAN MESAJUL “ESTI OFFLINE!”

Mesajul te avertizeaza ca nu esti logat si astfel nu vei putea trimite masuratorile facute catre serverul central. Se recomanda sa fii tot timpul logat.

Apasa pe **Intra in cont**, iti introduci numele de utilizator si parola si te conectezi.

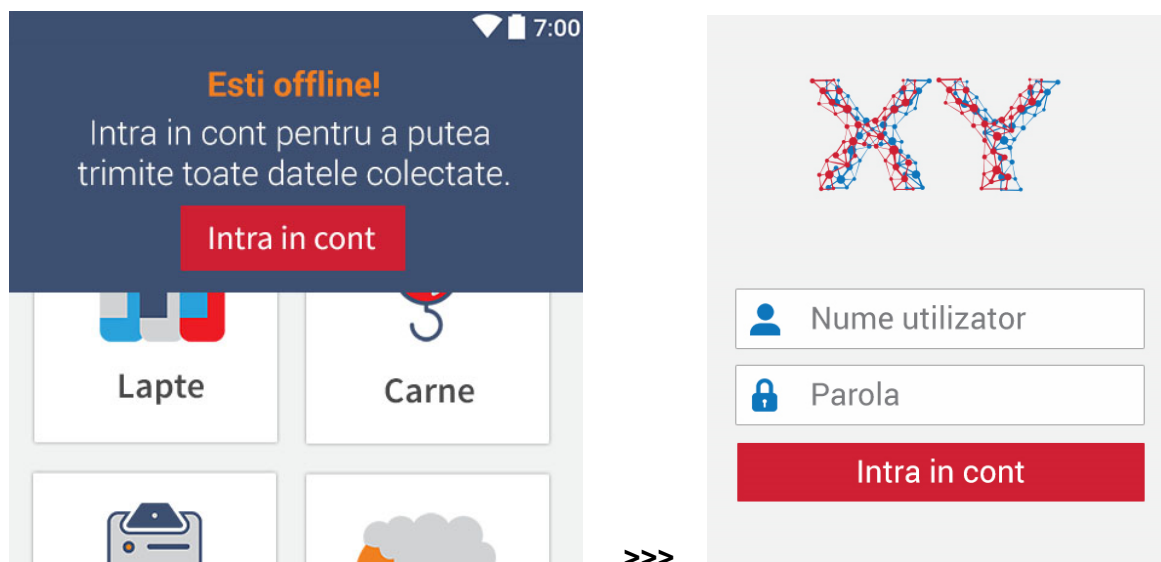

NU MA POT LOGA IN CONT

Verifica daca conexiune de date sau wifi-ul sunt active si ai acces la internet.

Daca este o alta eroare te rugam sa ne semnalezi exact ce iti spune aplicatia pentru a-ti oferi suport sau pentru a remedia problema.

IMI APARE MESAJUL DE “FUNCTIE INDISPONIBILA”

Daca atunci cand accesezi unele functionalitati din meniu sau de pe ecranul de start iti apare mesajul din imaginea de mai jos inseamna ca functia respectiva nu este introdusa in aplicatie si nu este functionala.



Te rugam sa actualizezi aplicatia sau sa o dezinstalezi si sa o instalezi din nou.

Atentionare! Asigura-te ca ai trimis toate datele masurate pentru ca la dezinstalare **se sterg** toate datele si de aceea trebuie sa le trimiti pe toate inainte de a dezinstala.

Daca tot nu functioneaza te rugam sa ne semnalezi mesajul pentru a verifica.

VREAU SA ACTUALIZEZ APLICATIA CU ULTIMA VERSIUNE

Sistemul de operare al telefonului sau al tabletei iti va sugera periodic sa faci update la aplicatie. Iti recomandam sa dai accept si sa faci update.

In cazul in care doresti sa faci in mod expres update atunci poti intra pe Play Store, cauta aplicatia Registrul genealogic XY si apasa Actualizeaza.

VREAU SA INSTALEZ/SA REINSTALEZ APLICATIA



Aplicatia poate fi instalata accesand PlayStore cautand **Registrul genealogic - XY**.

Avand in vedere ca aplicatia **Registrul genealogic XY** este in continua dezvoltare este posibil sa apara uneori anumite probleme legate de actualizari si functionalitati care nu merg in parametric normali. Este recomandat in aceste situatii sa fie fie deinstalata aplicatia si apoi reinstalata.

Atentionare! Asigura-te ca ai trimis toate datele masurate pentru ca la deinstalare **se sterg** toate datele si de aceea trebuie sa le trimiti pe toate inainte de a deinstalla.

CE FAC DACA A MERS CITITORUL DAR NU MAI MERGE

- In cazul in care s-a schimbat configuratia tabletei sau telefonului pe care este instalata aplicatia te rugam sa repeti pasii de instalare (**Sectiunea A**)
- Daca este aceeaasi configuratie iti recomandam sa restartezi aplicatia
 - inchizand si deschizand aplicatia sau
 - scotand aplicatia din memorie si apoi repornita sau
 - repornind tableta sau
 - reinstaland (deinstalare si instalare) aplicatia
- Deasemenea, verifica daca cititorul nu este deja conectat la alt dispozitiv verificand iconita de pe cititor.

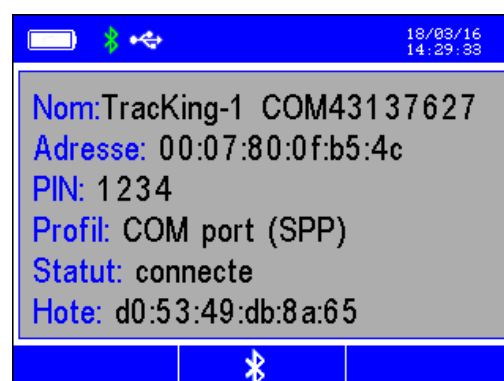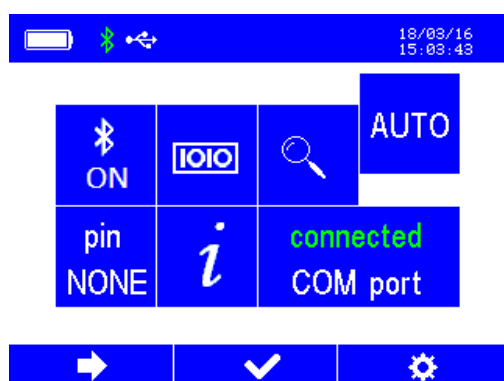

“TRIMITE TOATE DATELE” NU FUNCTIONEAZA




1) Verifica conexiunea la internet.

2) Controalele finalizate se trimit daca:

- controlul a fost facut cu cel putin o zi in urma
- daca cele facute in ziua in curs au fost finalizate prin apasarea butonului **Finalizeaza control** din panoul cu controale finalizate

- ### 3) Daca totusi nu functioneaza sa le trimiti pe toate odata atunci incearca sa le trimiti pe fiecare separat, accesand raportul individual al fiecarui control (**Sectiunea B – Finalizeaza control**). Controlul trebuie sa fie finalizat pentru a fi trimis. Raporteaza-ne problema semnalata.

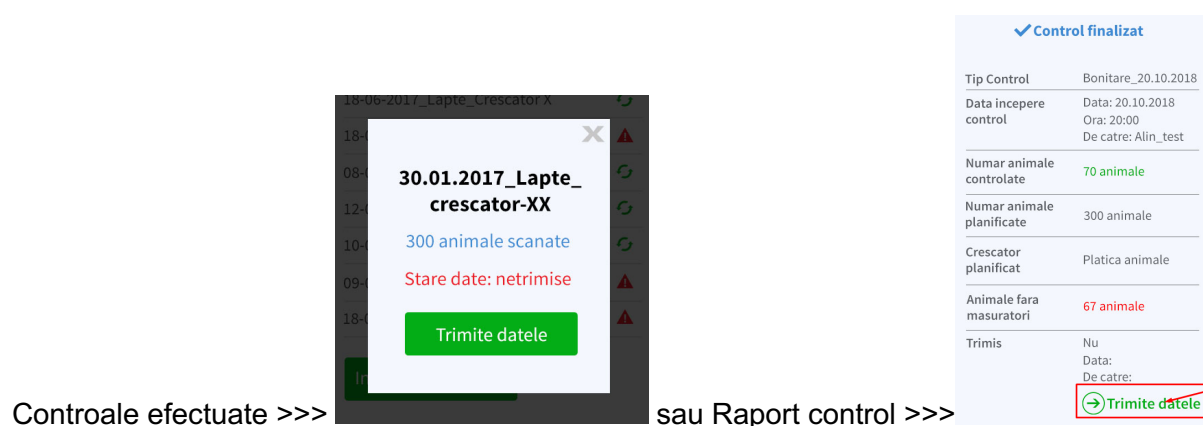

4) Daca Trimite datele de pe fiecare control individual nu functioneaza verifica

- daca controlul a fost facut cu cel putin o zi in urma

- daca cele facute in ziua in curs au fost finalizate prin apasarea butonului **Finalizeaza control** din panoul cu controale finalizate

Daca tot nu functioneaza te rugam sa ne raportezi problema pentru a o remedia.

Contact

In cazul in care ai incercat mai multe solutii si aplicatia tot nu functioneaza asa cum ar trebui, iti sugeram sa dezinstalezi aplicatia si sa o reinstalezi.

Atentionare! Asigura-te ca ai trimis toate datele masurate pentru ca la dezinstalare **se sterg** toate datele si de aceea trebuie sa le trimiti pe toate inainte de a dezinstala.

Daca nici aceasta optiune nu va ajuta atunci, te rog sa raportezi imediat orice problema pe email, telefon sau folosind formularul **Lasa-ne parerea ta** din meniu, ca noi sa le putem remedia cat mai repede.

Persoana de contact: Alin Bordeanu

E-mail: contact@registrulgenealogic.ro

Telefon: 0736 818 969